


DL-Mini01

Камера вертикального электрофореза (две пластины)

Особенности и преимущества

- Изготовлен из высокопрочных и прозрачных материалов методом инъекционного литья
- Дизайн в общепринятом стиле, элегантный и современный
- Простой в эксплуатации, с удобным и продуманным дизайном
- Интегрированный дизайн стеклянных стенок с уплотнением, что обеспечивает отсутствие утечек геля
- Отдельное устройство для подготовки геля, процесс подготовки прост и надежен
- Высококачественные платиновые электроды, отличная проводимость, высокая коррозионная стойкость
- Отключение питания при снятии крышки для обеспечения безопасности эксперимента
- Функция ограничения крышки, предотвращающая неправильное подключение электродов
- Поддерживает одновременную работу с двумя пластинами для электрофореза

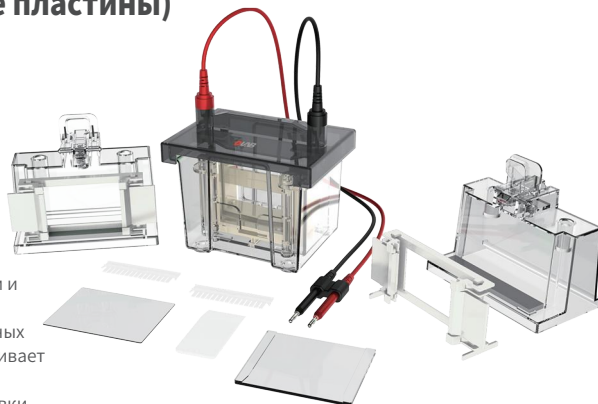

Технические характеристики

Площадь геля: 83 × 73 мм

Толщина геля: 0.75, 1, 1.5 мм (выбор)

Количество лунок гребенки для образцов: 10, 15

Стандартная комплектация

Название	Единица	Количество
Крышка (включая провода)	комплект	1
Нижняя камера	шт.	1
Стержень электрода	комплект	1
Толстая пластина из гелевого стекла	шт.	5
Тонкая пластина из гелевого стекла	шт.	5
Гребенка на 10 лунок	шт.	2
Гребенка на 15 лунок	шт.	2
Подставка для гелевого корпуса	шт.	2
Каркас корпуса	шт.	2
Перегородка	шт.	1
Средство для удаления геля	шт.	1