


DL-ZY02

Камера электрофореза (перенос)

Особенности и преимущества

- Подходит для быстрого и качественного переноса небольших объемов белковых гелей
- Изготовлен из прозрачного поликарбонатного материала методом литья
- Расстояние между электродами 4 см, для создания сильного электрического поля, обеспечивающего эффективный перенос белков
- Высококачественные платиновые электроды, обеспечивающие отличную проводимость
- Цветная маркировка на трансфере и электродах, гарантирует правильное направление геля
- Встроенный ледяной контейнер для быстрого поглощения тепла, возникающего во время процесса переноса

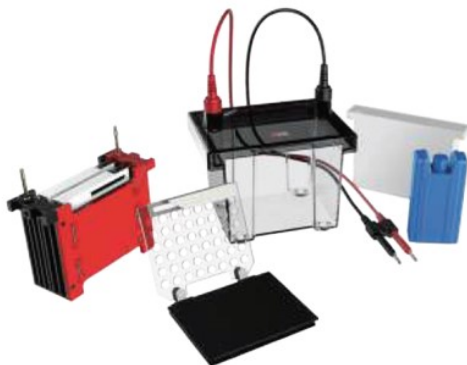

Технические характеристики

Площадь переноса: 110×90мм

Стандартная комплектация

Название	Единица	Количество
Крышка (включая провода)	комплект	1
Нижняя камера (включая электроды)	шт.	1
Стержень электрода для трансфера	шт.	1
Кассета с держателем для геля	комплект	2
Губчатая прокладка для переноса	шт.	4
Белый ледяной контейнер	шт.	1
Синий ледяной контейнер	шт.	2